


STETOSKOP LD Návod k použití

NÁZVY ČÁSTÍ A SOUČÁSTEK

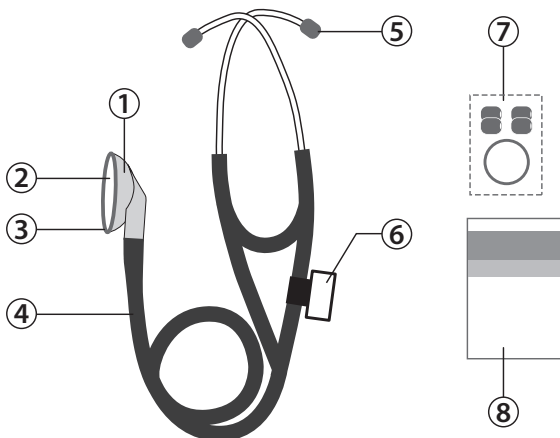


1. Hlavice k stetoskopu
2. Membrána pro stetoskop
3. Plastový kroužek
4. Trubice zdravotnická spojovací s vnitřní pružinou a vestavěnou binaurální trubicí
5. Nástavce do uší (olivky)
6. Typový štítek
7. Doplnkový komplet příslušenství
8. Návod k obsluze se záručním listem

OBCENÉ INFORMACE

LD Cardio je vysoce kvalitní kardiologický stetoskop pro lékaře. LD Cardio umožňuje provádět auskultaci v celém frekvenčním rozsahu u dospělých a dětí.

Speciální geometrie hlavice a materiál membrány umožňují zdůraznit pozornost při auskultaci ve středním rozsahu, což je zvláště důležité pro poslech zvuků srdce. Frekvenční charakteristika v rozsahu 200-500 Hz má pro stetoskop této třídy unikátní citlivost.

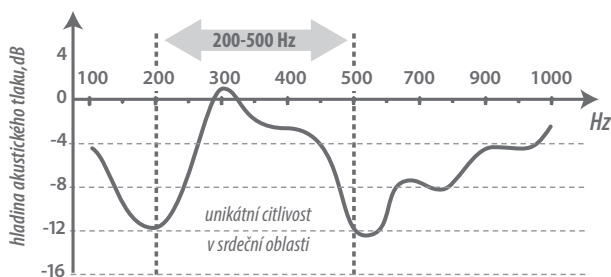

LD Cardio vysoce kvalitní akustický systém přenosu zvuku z membrány do uší lékaře. Hlavice stetoskopu a zvukově vodivá trubice má dva zvukově vodivé kanály, pro každé ucho zvláště. Oba zvukově vodivé kanály jsou spojeny do jednoho celku pro eliminaci

šumu, vzniklého vzájemným třením. Materiál zvukově vodivé trubice, optimální tuhost přilehávých nástavců do uší a přesnost spojení částí stetoskopu maximálně eliminují vnější a vlastní šумы při jeho používání.

OBSAH BALENÍ

č.	Název	Množství	Model	Poznámka
1	Hlavice k stetoskopu	1 kus.	LD-S044	s membránou
2	Trubice zdravotnická spojovací	1 kus.	LD-S043	s vnitřní pružinou a vestavěnou binaurální trubicí
3	Nástavce do uší (měkké)	1 pár	LD-S046	
4	Nástavce do uší (měkké)	2 páry	LD-S046	obsaženo v doplňkovém příslušenství
5	Membrána	1 kus.		obsaženo v doplňkovém příslušenství
6	Pouzdro pro doplňkové příslušenství	1 kus.		obsaženo v doplňkovém příslušenství
7	Typový štítek	1 kus.		
8	Návod k obsluze se záručním listem	1 kus.		
9	Balení	1 kus.		

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Provedení	LD Cardio
Průměr membrány	44 mm
Délka trubice	56 cm
Provozní podmínky: teplota relativní vlhkost	od 10 °C do 40°C 85% a méně
Podmínky skladování a přepravy: teplota relativní vlhkost	od mínus 34 °C do 50°C 85% a méně
Rozměry v balení	440(d) x 180(š) x 43(h) mm
Hmotnost bez balení	200 g
Životnost	7 let
Rok výroby	Rok a měsíc výroby je uveden na balení

PÉČE, SKLADOVÁNÍ, OPRAVY A LIKVIDACE

Důležité!

1. Stetoskop je třeba chránit před zvýšenou vlhkostí, přímými slunečními paprsky, úderem.
2. Neskladujte a nepoužívejte stetoskop v blízkosti topných těles a otevřeného ohně.
3. Chraňte stetoskop před znečištěním.
4. Styk stetoskopu s agresivními látkami není přípustný.
5. V případě potřeby provádějte opravy pouze ve specializovaných organizacích. Adresy organizací, provádějících záruční servis jsou uvedeny v záručním listě.
6. Při likvidaci se řiďte pravidly, platnými v aktuální době ve všem regionu. Výrobce zvláštní podmínky pro likvidaci nestanovil.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Na tento stetoskop je poskytována záruční doba 24 měsíců od data prodeje.
2. Záruční podmínky jsou formulovány záručním listem při prodeji přístroje kupujícímu. Záruční list je umístěn na poslední stránce tohoto Návodu.
3. Záruka se nevztahuje na zboží, které přestalo fungovat a/nebo bylo poškozeno v důsledku nesprávného použití, které vedlo k poškození; modifikaci, opravy

nekvalifikovanou organizací (soukromou osobou); porušení provozních pravidel, a/nebo skladování, a/nebo přepravy; činnosti třetích osob nebo vyšší moci. Při koupi stetoskopu požadujte vyplnění záručního listu obchodní organizací.

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ:

CE 0123 Shoda se Směrnicí 93/42 / EHS

Důležité! Přečtěte si návod

Výrobce

EC REP Zástupce v Evropské Unii

Chraňte před vlhkem

Datum úpravy tohoto Návodu k použití je uvedeno na poslední stránce ve formě IXXX/YYMM/NN, kde YY je rok, MM měsíc úpravy a NN číslo úpravy.

Výroba je certifikována podle mezinárodní normy ISO 13485. Přístroj odpovídá Evropské směrnici MDD 93/42/EEC.

Vyrobeno pod kontrolou a pro Little Doctor International (S) Pte. Ltd. (7500A BEACH ROAD #11-313 THE PLAZA SINGAPORE 199591, adresa pro korespondenci: Yishun Central P. O. Box 9293 Singapore 917699).

Výrobce: Little Doctor Electronic (Nantong) Co. Ltd. (No. 8, Tongxing Road Economic & Technical Development Area, 226010 Nantong, Jiangsu, People's Republic of China).

Distributor v Evropské unii: Little Doctor Europe Sp. z o. o. (57G Zawila Street, 30-390 Kraków, Poland, phone: +48 12 2684746, 12 2684747, fax: +48 12 268 47 53, e-mail: biuro@littledoctor.pl)

Více informací najdete na www.littledoctor.sg

Záruční list

Model	Datum prodeje
Sériové číslo	Záruční doba
Jméno kupujícího	
Podpis prodejce	Pečeť (razítko) prodávajícího

Vyplňuje zástupce autorizovaného servisního střediska.

Datum	Servisní poznámky

Little Doctor Electronic (Nantong) Co., Ltd.,
No.8, Tongxing Road Economic & Technical Development
Area, 226010 Nantong, Jiangsu, People's Republic of China

EC REP Little Doctor Europe Sp. z o.o. 57G Zawila Street Krakow 30-390 Poland

© Registered trade marks of Little Doctor International (S) Pte. Ltd. (Singapore).
© Copyright Little Doctor International (S) Pte Ltd., 2019.

