

Neobsahuje léky
Neobsahuje jehly
CVIČNÉ PERO EpiPen


Pouze pro praxi
Není hračka

1. Odstraňte modrý ochranný kryt jeho vytažením nahoru, aniž byste jej ohýbali nebo kroutili.

2. Otočte a pevně zatlačte oranžový hrot na vnější stranu stehna, aby ten „zacvaknul“

Po dobu 3 sekund **držte** pero pevně ve stehně pro simulaci dodání léku.

3. Špička se po použití vysune.

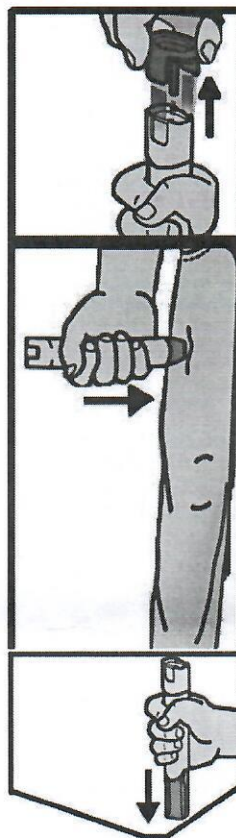

Resetování trenéra:

vyměňte modrý ochranný kryt stlačením stran, zatlačte hrot dolů.

